




CARDIAC INTERVENTION

PreludeEASE™

INTRODUCTOR HIDROFILICO

Aguja de Acceso
Merit Advance®

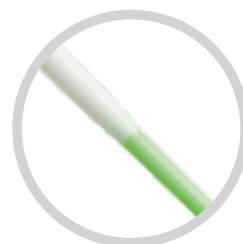

Excelente transición
entre vaina y dilatador



Consiga un acceso
radial fácilmente

BENEFICIOS DE LA VÍA RADIAL

Entre los conocidos beneficios de la vía radial están la reducción de las complicaciones hemorrágicas, la deambulación más rápida y el menor coste de la intervención. Merit Medical presenta una nueva línea de introductores **HIDROFÍLICOS** para vía radial, la **PreludeEASE**. Los estudios han demostrado que el recubrimiento hidrofílico de los introductores reduce la incidencia de espasmo arterial durante los procedimientos por vía radial y también reduce la cantidad de fuerza necesaria para insertar y extraer un introductor para vaina radial.¹

Los introductores hidrofílicos PreludeEASE, combinado con una gama de productos, accesorios y kits personalizados para vía radial, le ofrecen las opciones que usted necesita para un acceso radial fácil.

PreludeEASE™
Introductores Hidrofílicos



SOLUCIONES PARA VÍA RADIAL

Introdutores disponibles de 4 a 7 F

Tamaños menores para los pacientes con una arteria radial más pequeña. También están disponibles introductores de mayor tamaño para facilitar los procedimientos diagnósticos e intervencionistas.

Recubrimiento hidrofílico

El recubrimiento hidrofílico del introductor PreludeEASE llega hasta la punta distal. El recubrimiento hidrofílico facilita la inserción y la extracción además de ser más cómodo para el paciente.²

Transiciones excelentes

Para una inserción suave y fácil que mejora la comodidad del paciente.



COMPONENTES DEL KIT PARA RADIAL



Aguja Merit Advance®

La aguja corta y biselada con indicador de orientación del bisel en el conector y su recubrimiento patentado contribuyen a una inserción suave. Una punción fácil y precisa puede ayudar a reducir el riesgo de espasmo.³



Opciones de guía

Están disponibles kits con guía de acero inoxidable, de nitinol o con guía con camisa de plástico para ofrecerle la opción que necesite para su práctica diaria.



Dispositivo para inserción de guía BowTie™

Se incluye en los kits que incorporan guía de 0.018" para facilitar su manipulación.



Aguja de abordaje de dos partes

- Cánula metálica de paredes finas
- Catéter radiopaco y flexible
- Transición suave del catéter a la aguja para una fácil inserción
- Excelente para la técnica de abordaje de dos paredes

OPCIÓN DE KITS PERSONALIZADOS

Merit puede adaptar los kits para satisfacer sus necesidades clínicas.

¹ Rathore S, Stables R, Pauriah M, Hakeem A, Mills J, Palmer N, Perry R, Morris J. Impact of length and hydrophilic coating of the introducer sheath on radial artery spasm during transradial coronary intervention. JACC. 2010 May;3(5):475-83.

² Kiemeneij F, Fraser D, Slagboom T, Laarman G, van der Wieken R. Hydrophilic coating aids radial sheath withdrawal and Rojouces patient discomfort following transradial coronary intervention: a randomized double-blind comparison of coated and uncoated sheaths. Catheter Cardiovasc Interv. 2003 Jun;59(2) 161-4.

³ Kiemeneij F. Prevention and management of radial artery spasm. Journal of Invasive Cardiology. 2006 April;18(4).

En cada paso de su procedimiento por vía radial, Merit Medical le ofrece productos de alta **CALIDAD** diseñados para satisfacer sus necesidades clínicas. Desde el abordaje, pasando por la intervención, hasta la hemostasia, nuestra gama integrada de **PRODUCTOS** para la **VIA RADIAL** le ayudará a conseguir la **EFICIENCIA** clínica, económica y procedimental esencial para ofrecer la mejor **ATENCIÓN** posible.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Nº DE CATÁLOGO	FR	LONGITUD	AGUJA	DIÁMETRO Y LONGITUD DE GUÍA	TIPO DE GUÍA	COMPONENTES	COLOR DEL CONECTOR
PHR4F7018SC	4F	7 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	ROJO
PHR5F7018SC	5F	7 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	GRIS
PHR6F7018SC	6F	7 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	VERDE
PHR4F11018SC	4F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	ROJO
PHR5F11018SC	5F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	GRIS
PHR6F11018SC	6F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	VERDE
PHR7F11018SC	7F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	BOWTIE	NARANJA
PHR4F11018NTPD	4F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 40 cm	NT/PD (PALLADIUM) MANDREL	BOWTIE	ROJO
PHR5F11018NTPD	5F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 40 cm	NT/PD (PALLADIUM) MANDREL	BOWTIE	GRIS
PHR6F11018NTPD	6F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 40 cm	NT/PD (PALLADIUM) MANDREL	BOWTIE	VERDE
PHR4F16018NT	4F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	ROJO
PHR5F16018NT	5F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	GRIS
PHR6F16018NT	6F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	VERDE
PHR7F16018NT	7F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	NARANJA
PHR4F23018NT	4F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	ROJO
PHR5F23018NT	5F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	GRIS
PHR6F23018NT	6F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	VERDE
PHR7F23018NT	7F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.018" x 80 cm	MANDRIL DE NT/PT (PLATINO)	BOWTIE	NARANJA
PHR4F11021SC	4F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	ROJO
PHR5F11021SC	5F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	GRIS
PHR6F11021SC	6F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	VERDE
PHR7F11021SC	7F	11 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 45 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	NARANJA
PHR4F16021SC	4F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	ROJO
PHR5F16021SC	5F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	GRIS
PHR6F16021SC	6F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	VERDE
PHR7F16021SC	7F	16 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	NARANJA
PHR4F23021SC	4F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	ROJO
PHR5F23021SC	5F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	GRIS
PHR6F23021SC	6F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	VERDE
PHR7F23021SC	7F	23 cm	21G x 4 cm ADVANCE	0.021" x 80 cm	MUELLE; PUNTA RECTA FLEXIBLE	NO	NARANJA
PHR6F11035SC	6F	11 cm	NO	0.035" x 50 cm	SS; DE - FLEXIBLE Y 3 MMJ	NO	VERDE
PHR7F11035SC	7F	11 cm	NO	0.035" x 50 cm	SS; DE - FLEXIBLE Y 3 MMJ	NO	NARANJA
PHR4F11021PW	4F	11 cm	22G x 2.5 cm (2 PARTES)	0.021" x 45 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	ROJO
PHR5F11021PW	5F	11 cm	22G x 2.5 cm (2 PARTES)	0.021" x 45 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	GRIS
PHR6F11021PW	6F	11 cm	22G x 2.5 cm (2 PARTES)	0.021" x 45 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	VERDE
PHR4F23021PW	4F	23 cm	22G x 2.5 cm (2 PARTES)	0.021" x 80 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	ROJO
PHR5F23021PW	5F	23 cm	22G x 2.5 cm (2 PARTES)	0.021" x 80 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	GRIS
PHR6F23021PW	6F	23 cm	22G x 2.5 cm (2 PARTES)	0.021" x 80 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	VERDE
PHR4F11025PW	4F	11 cm	20G x 3.2 cm (2 PARTES)	0.025" x 45 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	ROJO
PHR5F11025PW	5F	11 cm	20G x 3.2 cm (2 PARTES)	0.025" x 45 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	GRIS
PHR6F11025PW	6F	11 cm	20G x 3.2 cm (2 PARTES)	0.025" x 45 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	VERDE
PHR4F16025PW	4F	16 cm	20G x 3.2 cm (2 PARTES)	0.025" x 80 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	ROJO
PHR5F16025PW	5F	16 cm	20G x 3.2 cm (2 PARTES)	0.025" x 80 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	GRIS
PHR6F16025PW	6F	16 cm	20G x 3.2 cm (2 PARTES)	0.025" x 80 cm	PLÁSTICO NT; CONO CORTO; ANGULAR	*	VERDE

Presentación: 5 unidades por caja. (0.018"=0.46 mm 0.021"=0.53 mm 0.035"=0.89 mm) NT=Nitinol * Incluye escalpo de pulgar y jeringa de 3 mL.



Merit Medical Europe, Middle East & Africa

Amerikalaan 42, 6199 AE Maastricht-Airport, Netherlands
+31 43 358 82 22

Merit Medical Ireland Ltd.

Parkmore Business Park West, Galway, Ireland
+35 39 170 37 33

Merit Medical France

136 Ave. Joseph Kessel, 78960 Voisins Le Bretonneux, France
+33 (0)1 30 57 24 24

Merit Medical Systems, Inc.

1600 West Merit Parkway, South Jordan, UT, 84095 USA
+1 801 253 1600

Asia, Pacific Rim, Latin America, Caribbean & Canada

+1 801 208 4438

Free phone for specific country

Austria 0800 295 374	France 0800 91 60 30	Luxembourg 8002 25 22	Sweden 020 792 445
Belgium 0800 72 906 (Dutch) 0800 73 172 (French)	Germany 0800 182 0871	Netherlands 0800 022 81 84	Switzerland 00800 9000 5060
Denmark 80 88 00 24	Ireland (Republic) 1800 553 163	Norway 800 11629	UK 0800 973 115
Finland 0800 770 586	Italy 800 897 005	Portugal 800 180 127	